

iNLASE[®]

Fabriquez vos aligneurs
à la vitesse de la lumière

- ▷ Atteignez le plus haut niveau de qualité dans votre production quotidienne
- ▷ Gagnez du temps dans votre process



iNPLAN[®]

Le Logiciel
d'optimisation de la
production des
aligneurs iNOFFICE

- ▷ Développez votre production d'aligneurs



▷ Atteignez le niveau de performance ultime


Toutes les 120 secondes*, iNLASE découpe 6 nouveaux aligneurs. La découpe laser permet d'obtenir une surface lisse, sans polissage ni correction manuelle**, maximisant ainsi le temps gagné sur le process de fabrication.

Associé au logiciel iNPLAN, iNLASE vous permet d'adapter la production interne d'aligneurs au rythme du plan de traitement.

iNLASE peut découper jusqu'à 1 000 aligneurs par jour.



▷ Dimensions du produit

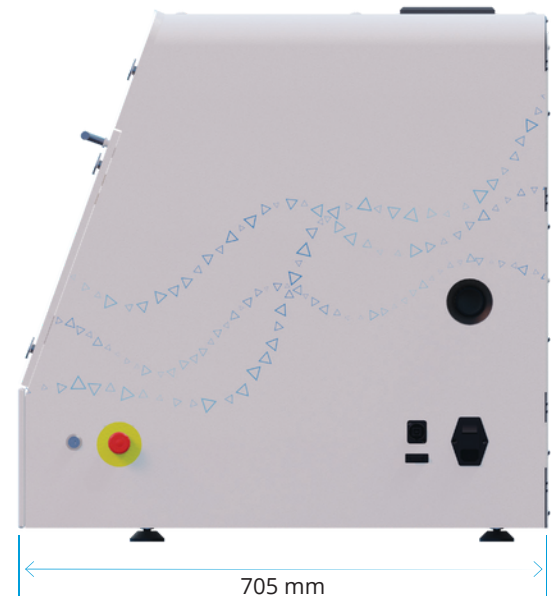

▷ Spécifications techniques

Spécifications techniques

- Laser : Class IV
- Longueur d'onde : 10,6 μm
- Puissance électrique : 240VAC
- Poids : 100 kg
- Système de filtration et d'extraction des fumées inclus***

Per formances

- Vitesse de découpe : 20"/aligneur*
- Plateau : 6 aligneurs
- Jusqu'à 1 000 aligneurs par jour

Logiciel iNPLAN

- Ligne de découpe semi-automatique
- Compatible avec les lignes de découpe externes (fichiers .PTS) des principaux logiciels de setup
- Licence annuelle séparée

* Dépend des modèles 3D et de la conception de la ligne de découpe.

** Dépend des modèles 3D et de la conception de la ligne de découpe. Tous les aligneurs doivent être nettoyés et décontaminés selon notre protocole de lavage.

*** Doit être connecté à un système d'extraction d'air externe ou directement à l'extérieur du cabinet ou du laboratoire.

iNPLAN[®]

est la clé pour les orthodontistes qui souhaitent créer leur propre marque et retrouver leur indépendance en produisant des aligneurs en cabinet. iNPLAN permet d'optimiser la production d'aligneurs et donne à chacun des acteurs du cabinet une vision en temps réel du flux de production.

Retrouvez votre indépendance

Choisissez le logiciel de plan de traitement que vous préférez. Utilisez iNPLAN en parallèle de votre logiciel de setup pour gérer votre flux de production.

Définissez votre flux de production

Avec iNPLAN, votre équipe peut facilement planifier et organiser la production de vos aligneurs, en fonction des commandes de votre cabinet. iNPLAN assure le suivi de l'impression 3D et du thermoformage, réduisant ainsi les risques d'erreurs dans votre flux de production.

Interface iNLASE (disponible uniquement avec l'usineuse Laser iNLASE)

- Trimline semi-automatique • Import de trimlines externes depuis les principaux logiciels de Setup
- Création automatique de la base de positionnement sur iNLASE à partir des fichiers STL
- Contrôle de iNLASE • Cloud sécurisé pour la sauvegarde des fichiers STL



Orchestrez votre production

Au rythme du plan de traitement

iNPLAN vous donne une vue complète du calendrier de traitement de chaque patient et vous guide dans la production du bon nombre d'aligneurs pour le prochain rendez-vous.



Soulagez vos équipes

De l'impression 3D à l'étiquetage, votre équipe dispose d'une vue en temps réel de la totalité du flux de travail, permettant d'organiser leur activité et de gérer facilement tout changement de calendrier.



Assurez la traçabilité

iNPLAN automatise l'impression des étiquettes pour chaque aligneur. Vous gagnez du temps à chaque étape et vous assurez la traçabilité.

ORTHOPLUS

28, rue Ampère 91430 IGNY

drc@orthoplus.fr

+33 1 69 41 90 28

MADE IN FRANCE

www.orthoplus.fr

orthoplus[®]
Distributeur exclusif